



Thermo Scientific Finnpipetteシステム 2026

One family of pipettes is all you need to
comfortably meet any application challenge

さまざまな条件でも 使いやすさと確かな精度を

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ システムは数十年にわたり、世界各地の多くのラボやさまざまなアプリケーションにおいて、人間工学に基づいた製品を提供してきました。製品開発では、常にラボの安全性、効率、成果の向上を重視しています。その結果、快適性、使いやすさ、精度の面で多くの現場に支持されています。

人間工学に基づいたデザイン

ピペット本体が軽量設計で、かつピペッティング操作も容易

豊富なモデル

シングルチャンネル、マルチチャンネル（8、12、16チャンネル）があり、0.2 µL～10 mLの容量に対応

チップの幅広いラインアップ

スタンダードチップや特殊チップから適したものを選択可能

通常のピペッティングではハンドリングが難しいアプリケーションにも対応できる特殊チップ

便利なカラーコード

容量別に色分けされたThermo Scientific™ Finnpiquette™ ピペットとThermo Scientific™ Finntip™ ピペットチップで、ピペットとチップを素早く判別可能

信頼の品質

全てのピペット、チップはISO 9001、ISO 14001、およびISO 13485 認証を取得

高い水準の保証

保証登録（オンライン）で保証期間を延長

- Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F1
マニュアルピペット
Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2
マニュアルピペット
3年間→5年間
- Thermo Scientific™ Finnpiquette™ Novus
電動シングル／マルチチャンネルピペット
1年間→2年間





Finnpipette F1ピペット

軽量設計、ピペッティングとチップ着脱に要する力の軽減に加え、確実な容量ロックと調整可能なフィンガーレストなどの特長を持つ、高品質なマニュアルピペット



Finnpipette F2ピペット

優れた耐久性と容易なメンテナンスで、より厳しいアプリケーションにも対応可能



Finnpipette Novusピペット

わかりやすい簡単な操作で
ハイスループットを支える
電動ピペット



Finntipピペットチップ

Finnpipetteピペットとの
組み合わせで、性能と快適性を
最大限発揮するデザイン

Finnpipetteシステム

最高の製品を目指した継続的な改良

お客さまからいただいた貴重なフィードバックをもとに、さらに改良を加えました。その結果、細かい条件にも対応できるピペットをご提供できるようになりました。性能と快適性の両立を追求し、信頼できるラボパートナーであることを目指しています。



Finnpipette F1

シングル／マルチチャンネルピペット

毎日のピペッティングを、より快適に

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F1シングル／マルチチャンネルピペットは、高い精度と操作性を備えたピペットです。操作時の負担軽減に配慮した軽量設計により、日常のピペッティング作業を快適に行えます。また、高価な試薬や貴重なサンプルを使用するアプリケーションに適しています。改良を重ねたFinnpipette F1シングル／マルチチャンネルピペットでピペッティングの新たな操作性をお試しください。

軽い操作感と静音設計

ほとんど力を入れずに、静かに容量設定できるようになりました。さらに、片手で設定できるため便利になりました。

新グリップで快適な安定感

刻み付きの調整ノブで、容量設定時に確かな感触が得られます。付属品のグリップストリップを付けると、さらにグリップ感が増し、操作効率が格段に向上します。

さらに軽くなったピペッティング操作

ピペッティングに必要な力をより軽減することで、精度をおろそかにすることなく、反復性ストレス障害(RSI)を予防できます。快適性と正確性を兼ね備えているため作業に集中できます。

親指への負荷を軽減した快適設計

広くなったチップイジェクターボタンで親指の動きに余裕が生まれ、快適に操作できます。

Finnpipette F1は軽くて使いやすいです。スペックどおりの値が何年も維持されています。見た目もきれいで、スタンドも気に入っています。

大学特別ラボ技術者 フィンランド



詳細はこちら thermofisher.com/finnpipette



軽快さと性能をさらに追求

“さらに”軽いプランジャーとチップ着脱力により、
新たな軽量設計モデルが誕生

快適な アジャスタブル フィンガーレスト

120°回転して、右利き、
左利きどちらにも対応可能

軽快なチップ イジェクション

ソフトタッチチップイジェク
ションにより、軽く押すだけ
でチップの取り外しが可能

スーパー ブローアウト

エア排出量が150%増加し、
正確な微量分注が可能
(50 µL以下のモデルに採用)

サイレント容量設定

- 音がなくスムーズに容量設
定ができ、当社従来モデルと
比較して、50%以上の軽さを
実現
- 改良されたダイヤルノブによ
り、安定したグリップ感を実現

容量自動ロックシステム

- 設定した容量を確実にロック
- ピペッティング中の不意な容量ズレ
を防止

Learn how the right combination of



TECHNIQUES



TOOLS



ERGONOMICS



SERVICE



support Good Laboratory Pipetting (GLP)

■ 詳細はこちら thermofisher.com/pipettes



Finnpipette F2 シングル／マルチチャンネルピペット

耐久性を重視した設計により、
要求の厳しい用途にも対応

多くのラボでは、ピペットに化学耐薬品性と物理的な耐久性が求められます。ピペットは強い作用を持つさまざまな化学物質に対する耐性を備え、かつ繰り返される強力な汚染除去にも耐えられなければなりません。

高い堅牢性と耐久性

Thermo Scientific™ Finn timer™ F2シングル／マルチチャンネルピペットは、強い作用を持つ化学物質や紫外線の有害作用に対する耐性がある強靱なPVDF製の部品を採用しています。日常的な使用による物理的な負荷にも耐えられる丈夫な設計です。

フルオートクレーブ対応

Finn timer F2シングル／マルチチャンネルピペットは、オートクレーブ時に分解／再組立する必要がありません。そのため簡単に汚染除去でき、トラブルやダウンタイムを最小限に抑えられます。

容易なメンテナンス

日常のメンテナンスや汚染除去は、チップコーンを取り外すだけで実施できます。



Finn timer F2シングルチャンネルピペットは簡単に分解できるため、汚染除去をより効果的に行えます。

詳細はこちら thermofisher.com/finnpipette





多様なニーズに適応するモデル

Finnpipette F2シングル／マルチチャンネルピペットの流線形デザインは、堅牢性と耐久性が不可欠な、要求の厳しいアプリケーションに適しています。日常的に汚染の懸念がある環境から、長期間にわたる集中的な作業まで、安定した操作が可能です。

Finnpipette F2は美しい流線形をしています。人間工学的に非常に優れたデザインで、長時間繰り返すサンプルの分注でも快適です。容量別にカラーコード化されているのも非常に便利で、考え抜かれた設計ですね。このピペットで作業するのが楽しく、作業手順がさらにスムーズになりました。

生物医学博士研究員 米国

Finnpipette Novus

電動シングル／マルチチャンネルピペット

電動ピペットによる操作の簡便化

安全かつ快適に

Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus電動シングル／マルチチャンネルピペットの連続分注機能は、プレート分注などの反復アプリケーションに優れた能力を発揮します。また、電動ピペッティング操作と速度調節機能により、微量分注や粘性の高いサンプルのピペッティングにおいても、安定した操作が可能です。

重要な分注作業において安全性と快適性を重視するなら、軽量設計とソフトタッチチップイジェクションを組み合わせたFinnpipette Novus電動ピペットが適しています。独自の人さし指トリガーにより、ピペッティング中の親指への負担を軽減します。さらにプログラムの保存や、前回のキャリブレーション以降のピペッティング回数を表示するキャリブレーションカウンターにより、データの保護と管理ができ、質の高い一貫した分析結果を提供します。




私は、スタンダードタイプのピペットで何年もピペッティングをしていたために、右手と右腕が反復性ストレス障害（RSI）になりました。ラボの業務から外れるかピペットを使わないようにするかの選択を迫られ、試しにNovusを使ってみました。すると、手や腕に負担が一切かからず、現在もラボの業務を続けられています。同僚もNovusを頻繁に借りに来るので同じ気持ちのようです。

フェルハト ハニム博士 英国バーミンガム大学

ピペッティング機能

ベーシックレベルの機能	
PIPETTE[通常分注] フォワード法の分注	フォワード法は、設定した容量を吸引し、全体を排出する一般的な方法です。バッファーなどの水溶液に適しています。
RPIPET[リバース分注] リバース法／ リピータ法の分注	リバース法は、分注量よりも多めに吸引し、設定容量のみを分注する方法です。粘性の高い溶液や微量分注に適しています。リピータ法は、リバース法の操作を繰り返す方法で、同一容量を連続的に繰り返し分注するのに迅速かつ簡単な手順として便利です。
STEPPER[連続分注]	ステッパー機能は、一定量ずつ分割して連続的に分注でき、特にマイクロプレートへの分注に適しています。
DILUTE[希釈]	ダイリュート機能は、2種類の液体をおのおの設定した容量で間に空気を挟んだ状態で吸引し、混合して分注します。

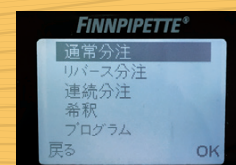

メニュー画面



通常分注



連続分注



初期設定は英語（日本語対応）

Ordering information

マニュアルピペット／適合チップ

Finnpipetteシングルチャンネルピペット

- 10 µL
- 20 µL
- 50 µL
- 100 µL／200 µL
- 300 µL
- 1,000 µL
- 5 mL
- 10 mL

容量	カラーコード	Finnpipette F1 製品番号	希望 小売価格	Finnpipette F2 製品番号	希望 小売価格	適合Finntip
0.2～2 µL	●	4641010N	¥53,240	4642010	¥45,320	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
0.5～5 µL	●	4641020N	¥53,240	4642020	¥45,320	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
1～10 µL マイクロ	●	4641030N	¥53,240	4642030	¥45,320	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
1～10 µL	●	4641040N	¥53,240	4642040	¥45,320	Finntip 250、フィルター 10 µL、Flex 200、Flexフィルター 30、200 Ext
2～20 µL	●	4641060N	¥46,800	4642060	¥40,800	Finntip 250、フィルター 20 µL、Flex 200、Flexフィルター 30、200 Ext
5～50 µL	●	4641140N	¥46,800	4642130	¥40,800	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
10～100 µL	●	4641070N	¥46,800	4642070	¥40,800	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
20～200 µL	●	4641080N	¥46,800	4642080	¥40,800	Finntip 250、フィルター 200 µL、Flex 200、Flexフィルター 200、200 Ext、フィルター 200 µL Ext
30～300 µL	●	4641090N	¥46,800	—	—	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
100～1,000 µL	●	4641100N	¥46,800	4642090	¥40,800	Finntip 1000、フィルター 1000 µL、Flex 1000、Flexフィルター 1000、1000 Ext、フィルター 1000 µL Ext
0.5～5 mL	●	4641110N	¥53,240	4642100	¥45,320	Finntip 5 mL、フィルター 5 mL
1～10 mL	●	4641120N	¥59,040	4642110	¥54,940	Finntip 10 mL、フィルター 10 mL、Flex 10 mL Ext

Finnpipetteマルチチャンネルピペット

チャンネル／容量	カラーコード	Finnpipette F1 製品番号	希望 小売価格	Finnpipette F2 製品番号	希望 小売価格	適合Finntip
8 ch、1～10 µL	●	4661000N	¥160,620	4662000	¥143,580	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
8 ch、5～50 µL	●	4661010N	¥160,620	4662010	¥143,580	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
8 ch、10～100 µL	●	4661020N	¥160,620	4662020	¥143,580	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
8 ch、30～300 µL	●	4661030N	¥160,620	4662030	¥143,580	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
12 ch、1～10 µL	●	4661040N	¥183,240	4662040	¥164,460	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
12 ch、5～50 µL	●	4661050N	¥183,240	4662050	¥164,460	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
12 ch、10～100 µL	●	4661060N	¥183,240	4662060	¥164,460	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
12 ch、30～300 µL	●	4661070N	¥183,240	4662070	¥164,460	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
16 ch、1～10 µL	●	4661080N	¥202,320	4662080	¥202,320	Finntip 20、フィルター マイクロ 20 µL
16 ch、5～50 µL	●	4661090N	¥202,320	4662090	¥202,320	Finntip 50、フィルター マイクロ 50 µL



詳細はこちら thermofisher.com/finnpipette

マニュアルピペット／適合チップ

Finnpipetteシングルチャンネル容量固定ピペット

容量	Finnpipette F1 製品番号	希望 小売価格	Finnpipette F2 製品番号	希望 小売価格	適合Finntip
1 µL	—	—	4652000	¥27,900	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
5 µL	—	—	4652010	¥27,900	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
10 µL	4651020N	¥33,280	4652020	¥27,900	Finntip 250、フィルター 10 µL、Flex 200、Flexフィルター 10、200 Ext
20 µL	4651130N	¥33,280	4652130	¥27,900	Finntip 250、フィルター 20 µL、Flex 200、Flexフィルター 30、200 Ext
25 µL	4651030N	¥33,280	4652030	¥27,900	Finntip 250、フィルター 30 µL、Flex 200、Flexフィルター 30、200 Ext
50 µL	4651040N	¥33,280	4652040	¥27,900	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext
100 µL	4651050N	¥33,280	4652050	¥27,900	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext
200 µL	4651140N	¥33,280	4652140	¥27,900	Finntip 250、フィルター 200 µL、Flex 200、Flexフィルター 200、200 Ext
250 µL	4651060N	¥33,280	4652060	¥27,900	Finntip 1000、フィルター 1000 µL、Flex 1000、Flexフィルター 1000、1000 Ext、フィルター 1000 µL Ext
500 µL	4651070N	¥33,280	4652070	¥27,900	Finntip 1000、フィルター 1000 µL、Flex 1000、Flexフィルター 1000、1000 Ext、フィルター 1000 µL Ext
1,000 µL	4651080N	¥33,280	4652080	¥27,900	Finntip 1000、フィルター 1000 µL、Flex 1000、Flexフィルター 1000、1000 Ext、フィルター 1000 µL Ext
2,000 µL	4651090N	¥33,280	4652090	¥27,900	Finntip 5 mL、フィルター 5 mL
3,000 µL	4651100N	¥33,280	4652100	¥27,900	Finntip 5 mL、フィルター 5 mL
5,000 µL	4651110N	¥33,280	4652110	¥27,900	Finntip 5 mL、フィルター 5 mL
10,000 µL	4651120N	¥40,900	4652120	¥37,820	Finntip 10 mL、フィルター 10 mL、Flex 10 mL Ext

注意事項：受注発注製品

GLPキット

製品名	キット内容	Finnpipette F1 製品番号	希望 小売価格	Finnpipette F2 製品番号	希望 小売価格
GLPキット2	4本セット 0.2～2 µL、2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL - Finnpipette Fスタンド - Finntip Flex 4ラック	4700860N	¥152,500	4700880	¥135,840
GLPキット4	3本セット 2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL - Finnpipette Fスタンド - Finntip Flex 3ラック	4701060N	¥118,820	4701070	¥102,980



アクセサリー

試薬リザーバー (リユース) ポリプロピレン製で、オートクレーブ可能です。

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
9510027	リージェントベイスン 60 mL	5個入	¥15,620
9510037	8ウェルリザーバー 10 mL/ウェル	10個入	¥15,620
9510047	1ウェルリザーバー 100 mL	10個入	¥14,260
8075	リザーバー 75 mL	10個入	¥14,940
8076	リザーバー 8075用PP製蓋	10個入	¥6,700

試薬リザーバー (ディスポーザブル) ポリスチレン製で滅菌済です。オートクレーブはできません。

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
8093-11	リザーバー 25 mL (滅菌済)	10個 × 10包	¥18,100
8094	リザーバー 25 mL (滅菌済)	1個 × 50包 (個包装)	¥18,100
8095	リザーバー 25 mL (滅菌済) 2分割タイプ	10個 × 10包	¥18,100
8096-11	リザーバー 25 mL (滅菌済) 2分割タイプ	1個 × 50包 (個包装)	¥18,100
8085	リザーバー 100 mL (滅菌済)	10個 × 10包	¥18,100
8086	リザーバー 100 mL (滅菌済)	1個 × 50包 (個包装)	¥18,100



試薬リザーバー

- 10 µL
- 50 µL / 1,200 µL
- 100 µL / 200 µL
- 300 µL
- 1,000 µL
- 5 mL
- 10 mL

電動ピペット／適合チップ

Finnpipette電動シングルチャンネルピペット

容量	連続分注時の容量※1	カラーコード	Finnpipette Novus 製品番号	希望 小売価格	適合Finntip
1～10 µL	0.5～10 µL	●	46200000	¥118,920	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
5～50 µL	2.5～50 µL	●	46200300	¥118,920	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 Ext
10～100 µL	5～100 µL	●	46200400	¥118,920	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
30～300 µL	15～300 µL	●	46200500	¥118,920	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
100～1,000 µL	50～1,000 µL	●	46200600	¥118,920	Finntip 1000、フィルター 1000 µL、Flex 1000、Flexフィルター 1000、1000 Ext、フィルター 1000 µL Ext
0.5～5 mL	0.25～5 mL	●	46200700	¥118,920	Finntip 5 mL、フィルター 5 mL
1～10 mL	0.5～10 mL	●	46200800	¥118,920	Finntip 10 mL、フィルター 10 mL、Flex 10 mL Ext

※1 連続分注時の容量:連続分注モードでの容量レンジ

Finnpipette電動マルチチャンネルピペット

チャンネル／容量	連続分注時の容量※1	カラーコード	Finnpipette Novus 製品番号	希望 小売価格	適合Finntip
8 ch、1～10 µL	0.5～10 µL	●	46300000	¥244,660	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
8 ch、5～50 µL	2.5～50 µL	●	46300200	¥244,660	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
8 ch、30～300 µL	15～300 µL	●	46300400	¥244,660	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
8 ch、100～1,200 µL	50～1,200 µL	●	46300800	¥292,400	Flex 1200、Flex フィルター 1200
12 ch、1～10 µL	0.5～10 µL	●	46300100	¥275,560	Finntip 10、フィルター マイクロ 10 µL、Flex 10、Flexフィルター 10
12 ch、5～50 µL	2.5～50 µL	●	46300300	¥275,560	Finntip 250、フィルター 100 µL、Flex 200、Flexフィルター 100、200 Ext、フィルター 100 µL Ext
12 ch、30～300 µL	15～300 µL	●	46300500	¥275,560	Finntip 300、フィルター 300 µL、Flex 300、Flexフィルター 300
16 ch、5～50 µL	2.5～50 µL	●	46300700	¥306,640	Finntip 50、フィルター マイクロ 50 µL

※1 連続分注時の容量:連続分注モードでの容量レンジ

アクセサリ

製品番号	製品名	希望小売価格
2214980	Novus/バッテリー	¥24,000
12905561	Novus充電器	¥8,100

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
9420400	Finnpipette Fスタンド(6本掛)	1台	¥17,580
9420290	Finnpipetteスタンド(バータイプ)(6本掛)	1台	¥15,800
9420320	Finnpipetteミニスタンド(3本掛)	1台	¥11,100
9420390	マルチチャンネルスタンド F	1台	¥5,840
9420360	Novusスタンド	1台	¥16,040
2206040	シェルフハンガー	1個	¥2,260



9420400
Thermo Scientific™
Finnpipette™ スタンド



9420390
Thermo Scientific™
マルチチャンネルスタンド F



9420290
Finnpipetteスタンド
(バータイプ)



9420360
Thermo Scientific™
Novusスタンド

Thermo Scientific Good Laboratory Pipetting

リキッドハンドリングの研究を重ねてきた歴史を基に、
確かな製品を提供し続けます。



TECHNIQUES



TOOLS



ERGONOMICS



SERVICE



優れた結果の実現に役立つ包括的な Good Laboratory Pipetting (GLP) ガイドブック
がダウンロードできます。スキルの向上に関するヒントを紹介しています。

詳細はこちら thermofisher.com/pipette

生産性の向上を目指して

ラボの効率を向上させるためには、研究員が装置の保守管理に煩わされることなく、作業に集中できる環境が重要です。当社は、カスタマイズ性と統合性に優れた包括的なサービスおよびサポートソリューションを提供しています。装置や機器の導入から廃棄に至るラボ業務全体において、生産性の向上、総コストの削減、ならびにコンプライアンスの遵守を支援します。



- Support Plans
- Parts and Consumables
- Training and More

Web登録で保証を延長できます。登録は無料です。

マニュアルピペットは通常3年間が5年間に、電動ピペットは通常1年間が2年間に

保証登録はこちら thermofisher.com/jp-pipette-warranty

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2017, 2023-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc LHC519-B2603CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific